

Cordis AVANTI™ + Introduutores

Desempenho uniforme do
início ao fim



CARDIOLOGIA: AVANTI™+ Introdutor padrão

Tamanho French	Cor	Diâmetro do mini guia (pol)	Cânula de 11 cm	
			Com Mini Guia	Sem Mini Guia
4	■	0,035	504-604X	504-604A
5	■	0,038	504-605X	504-605A
5,5	■	0,038	504-655X*	
6	■	0,038	504-606X	504-606A
6,5	■	0,038	504-656X*	
7	■	0,038	504-607X	504-607A
7,5	■	0,038	504-657X*	
8	■	0,038	504-608X	504-608A
8,5	■	0,038	504-658X*	
9	■	0,038	504-609X	504-609A
10	■	0,038	504-610X	504-610A
11	■	0,038	504-611X	

* Introdutor de monitoramento: possui um diâmetro interno ligeiramente maior para o monitoramento da pressão ou aspiração pelo acesso lateral com um cateter; é meio French maior



** 5F TM = Tamanho Médio = 5.5F
 6F TM = Tamanho Médio = 6.5F
 7F TM = Tamanho Médio = 7.5F
 8F TM = Tamanho Médio = 8.5F

CARDIOLOGIA: AVANTI™+ Introdutor médio

Tamanho French	Cor	Dilatador útil (cm)	Cânula de 23 cm	
			Sem obturador	
4	■	30	504-604T	
5	■	30	504-605T	
6	■	30	504-606T	
7	■	30	504-607T	
8	■	30	504-608T	
10	■	30	504-610T	
11	■	30	504-611T	



AVANTI™+ Introdutores

Para uma inserção atraumática


A cânula oferece um desempenho comprovado, confiável e adequado do começo ao fim



- Para uma inserção suave e atraumática
- Ótima resistência a kink
- Capacidade de manobra otimizada do cateter com extravasamento mínimo

Para uma inserção suave e sem traumas

- A ponta uniformemente cortada garante a transição fácil do introdutor, à medida que ele cruza o mini fio guia na artéria durante a inserção inicial
- Transições fáceis entre a cânula, o fio guia e o dilatador para:
 - entrada suave no vaso
 - maior conforto do paciente
 - menor risco de complicações

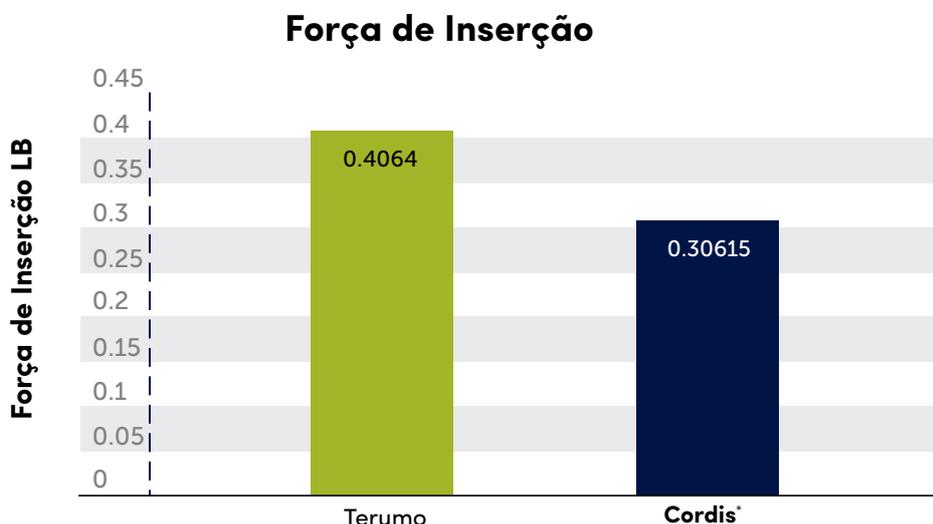

* Cordis RELATÓRIO DE TESTE DE ENGENHARIA 12621862. 2011


AVANTI™+ Introdutores

Flexibilidade e resistência para maior segurança do paciente

Ótima resistência a dobras

Material de camada dupla proporciona ao AVANTI™+ Introdutor uma excelente flexibilidade e resistência necessária para prevenir dobras, mesmo em vasos tortuosos e com tecido cicatricial


Raio de Torção

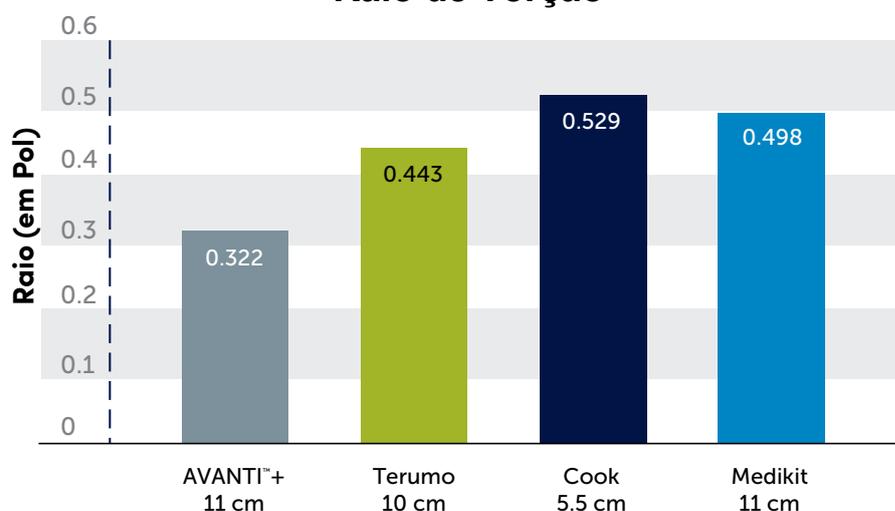

Capacidade de manobra otimizada do cateter com mínimo extravassamento

A válvula hemostática patenteada SLIX, com um desenho em espiral de seis cortes, permite o livre movimento do cateter sem refluxo de sangue ou aspiração de ar

Teste de Lubricidade da Válvula Hemostática (4F)

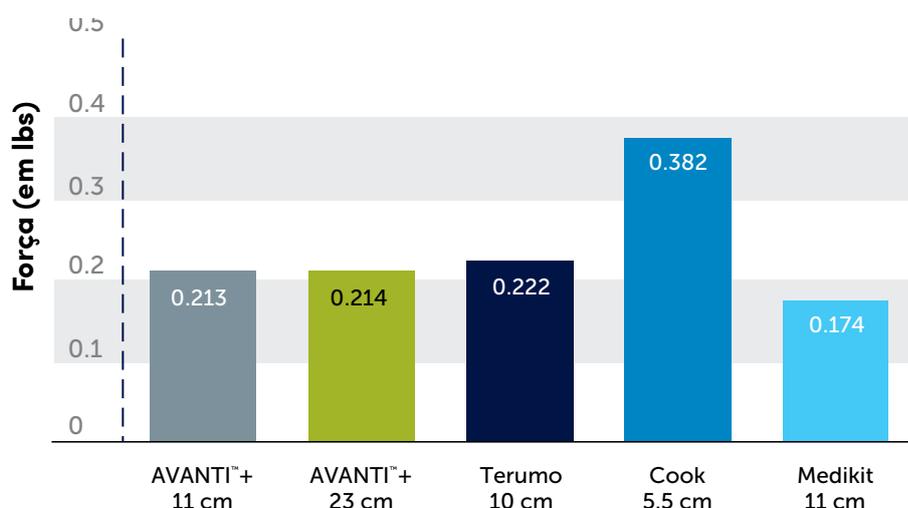

Desempenho Adequado do Começo ao Fim

Disponível com ou sem o mini fio guia
(comprimento médio sem o fio)

Disponível em três tamanhos

- ▶ 5,5cm = **braquial e pediátrico**
- ▶ 11cm = **comprimento padrão**
- ▶ 23cm = **comprimento médio**



Cordis AVANTI™+ Introduutores

CARDIOLOGIA: AVANTI™+ Introduutor braquial com mini fio guia

Cânula de 5,5 cm

Tamanho French	Cor	Diâmetro do Mini Guia (pol)	Código do Produto
4	■	0,035	504-604P
5	■	0,038	504-605P
6	■	0,038	504-606P



CARDIOLOGIA: AVANTI™+ Introduutor pediátrico com mini fio guia

Cânula de 7,5 cm

Tamanho French	Cor	Diâmetro do Mini Guia (pol)	Código do Produto
4	■	0,021	504-604S
5	■	0,021	504-605S
6	■	0,021	504-606S



CARDIOLOGIA: AVANTI™+ Kit do introduutor transradial com mini fio guia

Cânula de 11 cm

Cânula de 23 cm

Tamanho French	Cor	Diâmetro do Mini Guia (Pol)	Código do Produto	Diâmetro do Mini Guia (Pol)	Código do Produto
4	■	0,021	504-614Z	0,021 70 cm	504-624Z
5	■	0,021	504-615Z	0,021 70 cm	504-625Z
6	■	0,021	504-616Z	0,021 70 cm	504-626Z
7	■	0,021	504-617Z		



com mini fio guia

sem mini fio guia

Somente para profissionais de saúde.

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO e AVANTI são marcas comerciais da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Registro ANVISA AVANTI no 81576620006, 81576620009 e 81576620038.

© 2023 Cordis. Todos os Direitos Reservados. 100563754-3 12/2023

Cordis™