

Cordis[®]

BRITE TIP[™]

Introdutores

Iluminando o caminho para uma
colocação com precisão



BRITE TIP™ Introduutores

Flexibilidade e controle

Cânula resistente a dobras

EXCLUSIVA CÂNULA DE CAMADA DUPLA


- Flexibilidade e suporte para acessar vasos tortuosos

PAREDE DA CÂNULA MAIS ESPESSA

- Melhor resistência a dobras

CÂNULA E DILATADOR DE VASO REVESTIDOS DE SILICONE

- Entrada no vaso lubrificada e antitrombogênica

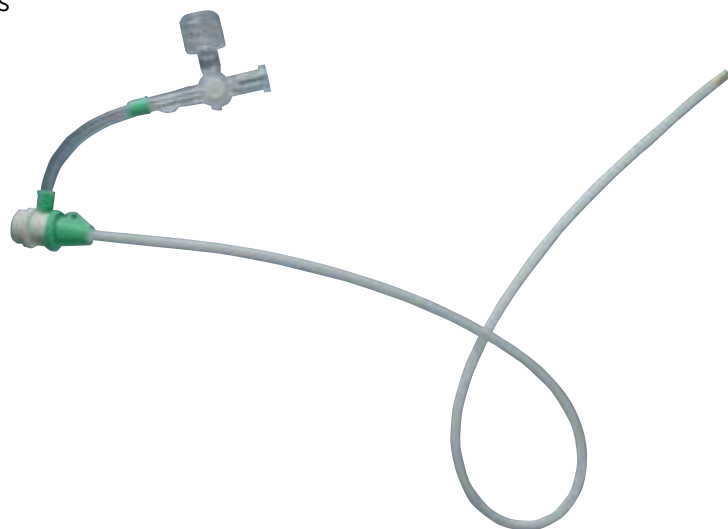

Válvula SLIX

PROJETO EM ESPIRAL DE SEIS CORTES DA VÁLVULA HEMOSTÁTICA

- Livre movimento do cateter sem refluxo de sangue ou aspiração de ar



BRITE TIP™ Introduutores

Colocação precisa e sem traumas

Desenho de cânula e dilatador cuidadosamente fabricados

TRANSIÇÕES CÔNICAS ENTRE A CÂNULA E O DILATADOR PARA:

- Entrada no vaso sem esforço
- Maior conforto do paciente
- Redução potencial das complicações no local de acesso, mesmo quando penetra em tecido cicatricial



BRITE TIP Introduutores com ponta radiopaca


PONTA DISTAL COM TUNGSTÊNIO PRETO

- A excelente visualização facilita a localização exata da ponta distal do introdutor para um posicionamento intervencionista preciso

BRITE TIP™ Introduutores

Informações para Pedidos

Comprimentos maiores disponíveis para uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas

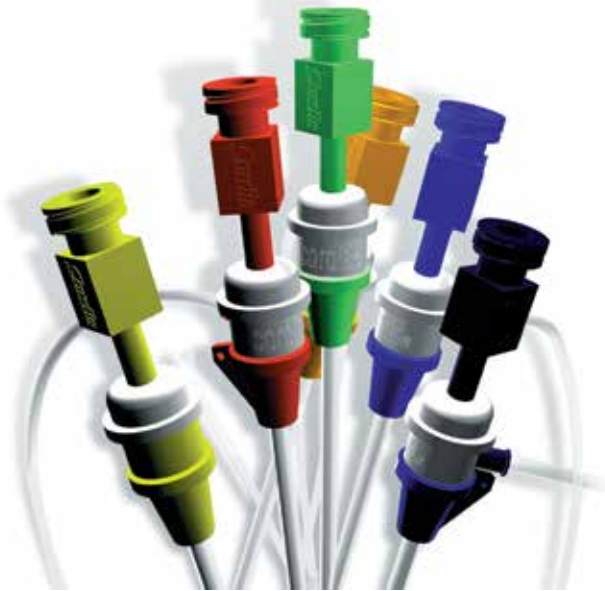

Código do Produto

Comprimento da Cânula			11cm	23cm	35cm	45cm	55cm	90cm
Tamanho French	Código cor	Ponta Dilatador (mm)	Com Mini Guia	Sem Mini Guia	Sem Mini Guia	Sem Mini Guia	Sem Mini Guia	Sem Mini Guia
4	■	25	401-411M	401-423M				
5	■	25	401-511M	401-523M	401-535M	401-545M	401-555M	
6	■	35	401-611M	401-623M	401-635M	401-645M	401-655M	401-690M
7	■	35	401-711M	401-723M	401-735M	401-745M	401-755M	401-790M
8	■	35	401-811M	401-823M	401-835M	401-845M	401-855M	
9	■	35	401-911M	401-923M	401-935M			
10	■	45	401-011M	401-023M				
11	■	45	401-111M	401-123M				

* Cada número de catálogo deve ser solicitado pela caixa

QUANTIDADE

- 5 unidades por pacote para comprimentos de 11 cm e 23 cm
- 2 unidades por pacote para comprimentos de 35 cm ou maiores

Somente para profissionais da saúde.

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.

CORDIS, Cordis LOGO e BRITE TIP são marcas comerciais registradas da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA BRITE TIP no 81576620006 e no 81576620020

©2023 Cordis. Todos os direitos reservados. 100563751-3 12/2023

Cordis®