

NEONTM NC

A Arte de

Restauração de Fluxo



NEONTM NC

Balão Não Complacente para
Angioplastia Coronária

NEONTM NC

Balão Não Complacente para Angioplastia Coronária

Para Casos Simples e Complexos

- Fabricado pela Kaneka Corporation, uma das principais fornecedoras de dispositivos intervencionistas do Japão.
- Agora parte do portfólio de angioplastia coronária da Cordis, uma empresa da Cordis.
- Desenho de Balão Japonês de Alta Qualidade.
- Desenvolvido para lesões menores e mais estreitas.

*Lesões desafiadoras, como lesões calcificadas ou tortuosas, não podem ser cruzadas com este catéter. O médico encarregado do procedimento deve determinar se este catéter é aplicável com base em suas experiências passadas.




RBP mais até 22 atm

Avanço no Desempenho da Capacidade de Cruzamento


ATÉ
22
ATM

Balão Não Complacente de Alta Pressão para Preservar a Precisão da Pós Dilatação com Confiança.

- Tecnologia Japonesa inovadora e de durabilidade reconhecida.
- Alta RBP de 22 atm, a maior do mercado.
- Baixa complacência que facilita precisão na pós dilatação.
- Desenvolvido para força e resistência.
- Maior pressão facilita aderência do stent.

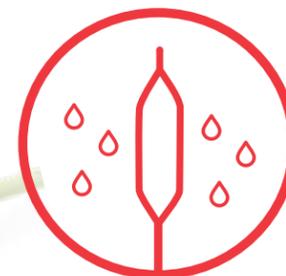

Revestimento Hidrofílico TR2 de Última Geração
Melhora a lubricidade reduzindo assim o atrito.

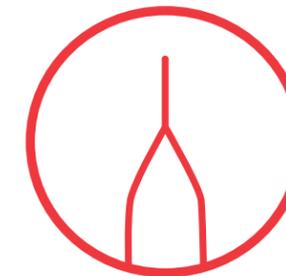

Formato de Balão Cônico
Apresenta uma ponta longa, macia e baixo perfil desenvolvido para evitar sanfonamento e facilitar cruzamento.



Exclusiva Tecnologia de Invólucro Triplo
Tecnologia de invólucro do balão otimizada.

1.5
mm


Diâmetro de perfil baixo de 1,5 mm Balão pós-dilatação*

Força do Balão

	Faixa de trabalho do Balão: NP – RBP (atm)**							
	10	12	14	16	18	20	22	24
Kaneka Raiden3™								
Medtronic NC Euphora™								
Boston Scientific NC Emerge™								
Abbott NC Trek™								
Biotronik Pantera Leo™								
OrbusNeich Sapphire NC™								
Terumo Accuforce™								

A menor pressão no gráfico se refere a NP e a maior à RBP.
RBP: 22atm (ø2,25-4,0mm; 20atm para Ø1,5-2,0mm + 4,25-4,5mm).

Capacidade de Cruzamento dos Produtos de Pós Dilatação de 3.0mm

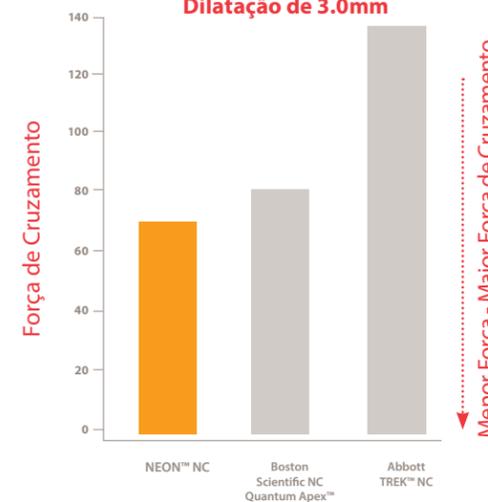

Dados do Cordis em arquivo, 2016.

* As informações relacionadas a produtos concorrentes foram obtidas de fontes públicas, incluindo sites da empresa, material de vendas e documentação relacionada em setembro de 2021.

Visão Geral e Informação para Pedidos



Principais Especificações	
Comprimento Útil:	146cm
Marcas Radiopacas:	1 (ø1.5 - 1.75mm) 2 (ø2.0 - 4.5mm)
Tamanho Máximo do Fio Guia:	0.36 mm (0.014")
Dobras do Balão:	2 dobras (ø1.5 ~ 1.75mm) 3 dobras (ø2 ~ 4.5mm)
Acessórios:	Agulha de Irrigação e Acessório para Redobragem

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)	Introdutor compatível (French)	Pressão Nominal (atm)	Pressão de Ruptura (atm)	Código de Referência
1.50	8	5	12	20	BN15008
1.75	8	5	12	20	BN17508
2.00	8	5	12	20	BN20008
2.00	10	5	12	20	BN20010
2.00	13	5	12	20	BN20013
2.00	15	5	12	20	BN20015
2.00	20	5	12	20	BN20020
2.25	10	5	12	22	BN22510
2.25	13	5	12	22	BN22513
2.25	15	5	12	22	BN22515
2.25	20	5	12	22	BN22520
2.50	8	5	12	22	BN25008
2.50	10	5	12	22	BN25010
2.50	13	5	12	22	BN25013
2.50	15	5	12	22	BN25015
2.50	20	5	12	22	BN25020
2.50	30	5	12	22	BN25030
2.75	10	5	12	22	BN27510
2.75	13	5	12	22	BN27513
2.75	15	5	12	22	BN27515
2.75	20	5	12	22	BN27520
3.00	8	5	12	22	BN30008
3.00	10	5	12	22	BN30010
3.00	13	5	12	22	BN30013
3.00	15	5	12	22	BN30015
3.00	20	5	12	22	BN30020
3.00	30	5	12	22	BN30030
3.25	10	5	12	22	BN32510
3.25	13	5	12	22	BN32513
3.25	15	5	12	22	BN32515
3.25	20	5	12	22	BN32520
3.50	8	5	12	22	BN35008
3.50	10	5	12	22	BN35010
3.50	13	5	12	22	BN35013
3.50	15	5	12	22	BN35015
3.50	20	5	12	22	BN35020
3.50	30	5	12	22	BN35030
3.75	10	5	12	22	BN37510
3.75	13	5	12	22	BN37513
3.75	15	5	12	22	BN37515
3.75	20	5	12	22	BN37520
4.00	8	5	12	22	BN40008
4.00	10	5	12	22	BN40010
4.00	13	5	12	22	BN40013
4.00	15	5	12	22	BN40015
4.00	20	5	12	22	BN40020
4.00	30	5	12	22	BN40030
4.25	10	5	12	20	BN42510
4.25	15	5	12	20	BN42515
4.50	10	5	12	20	BN45010
4.50	13	5	12	20	BN45013
4.50	15	5	12	20	BN45015
4.50	20	5	12	20	BN45020



NEON™ NC Balão Não Complacente para Angioplastia Coronária

ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes. O diâmetro insuflado do balão deve corresponder ao diâmetro do vaso para tratamento.

Apenas para profissionais de saúde.

Informações importantes: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo para indicações, contraindicações, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte de sua política de desenvolvimento contínuo de produtos, a Cordis se reserva o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia.

Entre em contato com seu representante Cordis para obter informações adicionais sobre a disponibilidade do produto.

CORDIS, Cordis LOGO e NEON são marcas comerciais da Cordis e podem estar registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários. Reg. ANVISA NEON NC no 81576620005