

Cordis PALMAZ BLUE™


Sistema de Stent Periférico .014

Entregando
Resultados visíveis



Cordis™

Construído com base no testado e comprovado design da família PALMAZ™ Stent

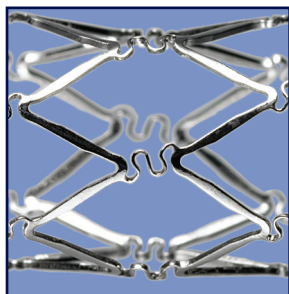

Padrão Ouro

O PALMAZ BLUE™ Stent Periférico .014" incorpora o comprovado design do PALMAZ™ Stent e do PALMAZ GENESIS™ Stent Balão Expansível Pré-Montado.

Desenho de Célula Fechada

- Elimina o efeito "escama de peixe"

Tubo Único Cortado a Laser

- Sem soldas, sem pontos fracos


Segurança com a Tecnologia "Nesting"

- Para uma excelente retenção do stent ao balão

Segmentos Flexíveis


- Para flexibilidade, ótima capacidade de entrega e mínimo encurtamento

Inovações de Design do Stent

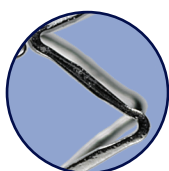

Estrutura Cônicas

- Força: estrutura é mais larga no centro para aumentar a força radial

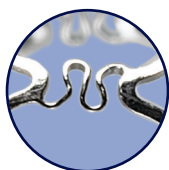

Segmentos Flexíveis Otimizados

- Aumenta a Flexibilidade e Capacidade de Entrega
- Encurtamento Mínimo




Perfil ultrabaixo combinado com sistema de entrega altamente flexível

Dispositivo de escolha, em rápida troca, para a intervenção com stent nas artérias renais

Capacidade de cruzamento aumentada

- Aprimorado design Flexsegment contribui para um sistema altamente flexível na pré-implantação
- O design de célula fechada permite navegação confiável mesmo nas angulações mais difíceis da artéria renal


Comparativo entre Capacidade de Cruzamento com Concorrentes (menos força resulta em melhor capacidade de cruzamento)

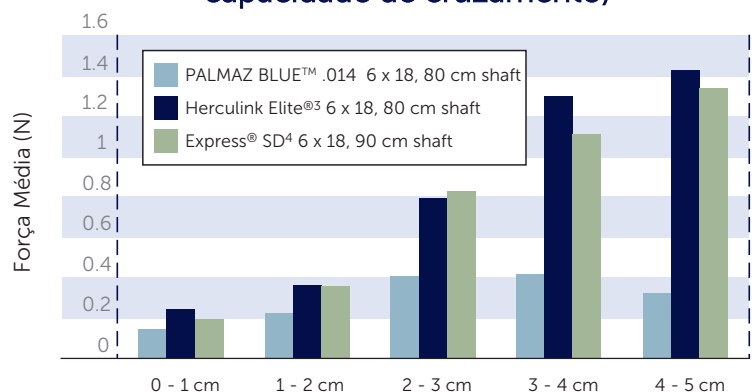

Entrega suave com baixo perfil

- Montado no AVIATOR™ Plus Cateter Balão .014" de rápida troca
- Baixo perfil primário para um stent crimpado

Comparativo entre Perfil Primário com Concorrentes (baixo perfil significa melhor capacidade de cruzamento)

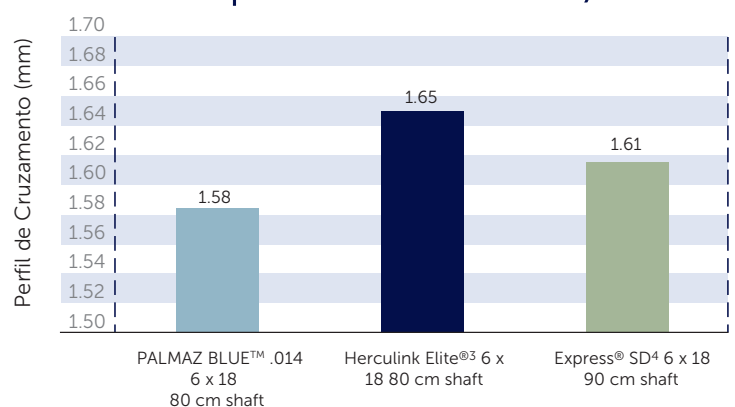

Precisão na implantação para segurança do paciente

- Encurtamento limitado devido ao desenho com diâmetros específicos
- Alta visibilidade pela presença de tungstênio na liga de Cromo Cobalto L605

Tudo isso enquanto mantém a alta força radial do stent em liga de cromo cobalto L605

Cordis PALMAZ BLUE™ Stent Periférico .014"

Entregando Resultados Visíveis

Informações para Pedidos

Comprimento do Stent Não Expandido (mm)	Comprimento do Stent Expandido (mm)	Diâmetro x Comprimento Balão (mm x mm)	Compatibilidade de Introdutor (F)	Compatibilidade de Cateter Guia (F)	Código do Produto	
					Comprimento do Sistema de Entrega (80 cm)	(142 cm)
12	12	4 X 15	4	6 (.070")	PB1240PPS *	PB1240PPX
12	11	5 X 15	5	6 (.070")		PB1250PPX
12	10	6 X 15	5	6 (.070")	PB1260PPS *	PB1260PPX
12	11	7 X 15	5	6 (.070")	PB1270PPS *	PB1270PPX
15	15	4 X 17	4	6 (.070")	PB1540PPS *	PB1540PPX
15	14	5 X 17	5	6 (.070")	PB1550PPS *	PB1550PPX
15	14	6 X 17	5	6 (.070")	PB1560PPS *	PB1560PPX
15	14	7 X 17	5	6 (.070")	PB1570PPS *	PB1570PPX
18	17	4 X 20	4	6 (.070")	PB1840PPS *	PB1840PPX
18	18	5 X 20	5	6 (.070")	PB1850PPS *	PB1850PPX
18	17	6 X 20	5	6 (.070")	PB1860PPS *	PB1860PPX
18	17	7 X 20	5	6 (.070")	PB1870PPS *	PB1870PPX
24	23	4 X 25	4	6 (.070")		PB2440PPX
24	24	5 X 25	5	6 (.070")		PB2450PPX
24	23	6 X 25	5	6 (.070")	PB2460PPS *	PB2460PPX
24	23	7 X 25	5	6 (.070")		PB2470PPX

* Códigos Importados Sob Encomenda MTO

Plataforma .014" de rápida troca

Produtos que podem ser utilizados com PALMAZ BLUE™ STENT PERIFÉRICO .014"

PALMAZ BLUE™ STENT PERIFÉRICO .014" pode ser utilizado junto com outros produtos do portfólio Cordis™. Os produtos abaixo são apenas uma sugestão. Por favor contate seu representante de vendas local para mais informações sobre os produtos e compatibilidades.

VISTA BRITE TIP™ Cateter Guia

- Excelente desempenho nas intervenções renais

VISTA BRITE TIP™ IG Cateter Guia Valvulado - Curvas Renais

- A combinação perfeita entre introdutor e cateter guia

BRITE TIP™ LONGO Introdutor

- Eficiente introdutor para as intervenções Renais

STABILIZER™ Fio Guia Dirigível .014"

- Fornece todo suporte necessário para um fio guia .014" nas intervenções periféricas

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. **Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.**

CORDIS, Cordis LOGO, PALMAZ BLUE, PALMAZ, PALMAZ GENESIS, AVIATOR, VISTA BRITE TIP, BRITE TIP e STABILIZER são marcas comerciais registradas da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA Palmaz Blue nº 81356112287, Reg. ANVISA Vista Brite Tip 6F/7F nº 81356112299, Reg. ANVISA Vista Brite Tip IG curva renal nº 81356112296, Reg. ANVISA Brite Tip 55/90 cm nº 81356112268, Reg. ANVISA STABILIZER nº 81356112271.

©2023 Cordis. Todos os direitos reservados. 100565182-2 05/2023