


Cordis
A Cardinal Health company

Cordis CarotidSystem

Cordis **PRECISE® PRO RX** Nitinol Self-Expanding Stent and
Cordis **Angioguard® RX** Emboli Capture Guidewire System

プリサイス®
アンジオガード®

**Simplicity and Precision
for Better Performance**

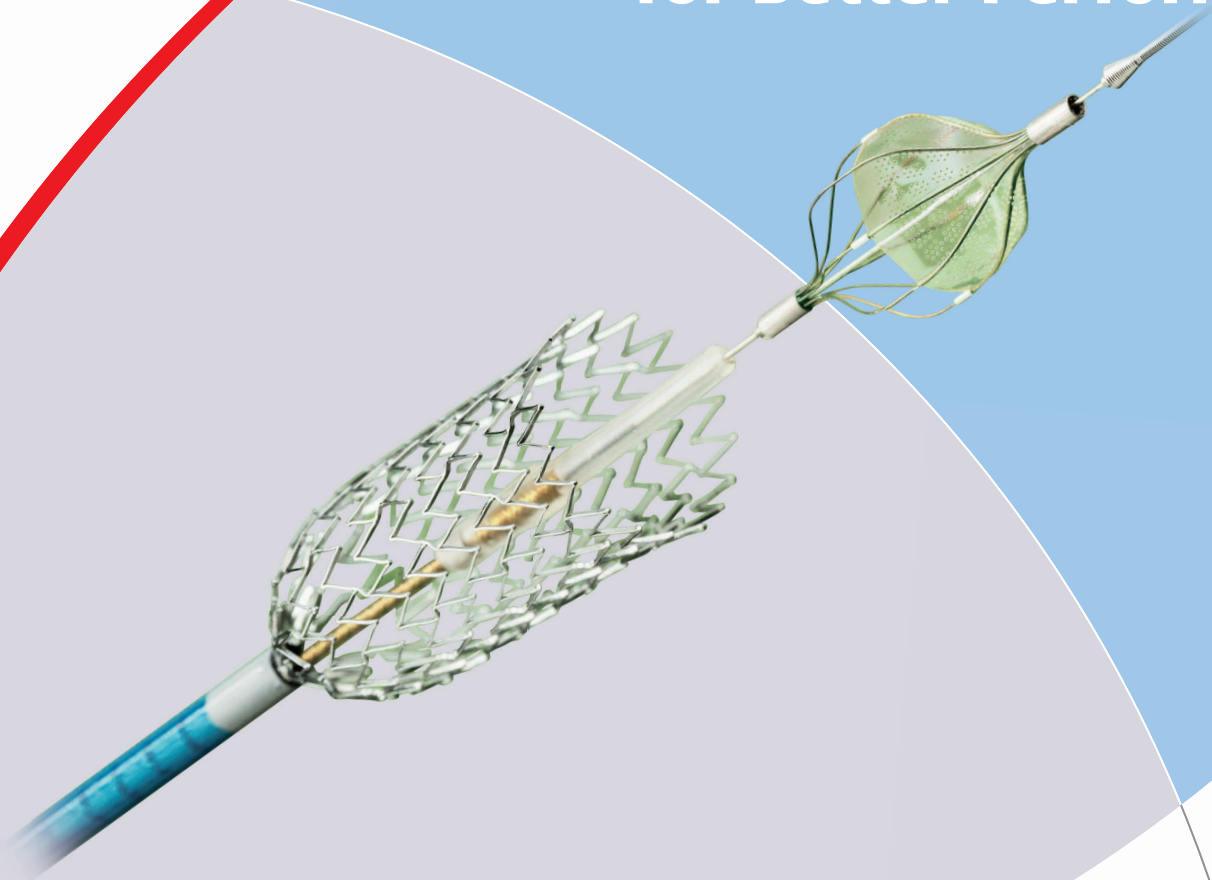

カーディナルヘルスジャパン


Cordis Carotid System

Cordis **PRECISE® PRO RX** Nitinol Self-Expanding Stent and
Cordis **Angioguard® RX** Emboli Capture Guidewire System

Conformability like no other

Peak to Valley

屈曲病変への留置時においてもステントストラットのPeakとPeakがかち合うことなく、滑らかな内腔を保持。

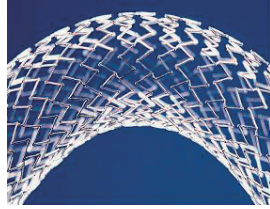


Segment Design

2mmのセグメントデザインにより、血管の形状にそったステント留置が可能。
SAPPHIRE Trialにおいても低いTLRを実現。(1年後:0.6%)

Conformability & Wall Apposition

オートテーパードesignで血管径に合わせた留置や、血管壁への高い密着性を実現。

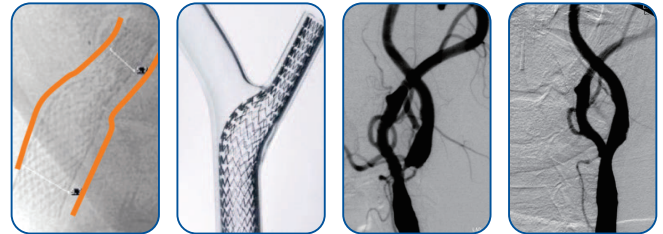


STENT 留置前

STENT 留置後

頸動脈ステント留置術におけるSAPPHIREでの長期成績

米国のSAPPHIRE Trial(多施設無作為化試験)でCEAハイリスク症例にPRECISE®が使用され、CASがCEAに劣らないことが示されました。

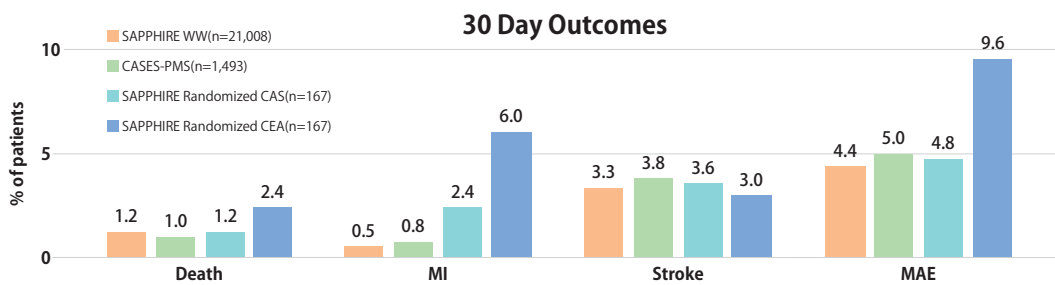

Over **21,000** patients studied

・CASES-PMS: Catheterization and Cardiovascular Interventions 70:316-323 (2007)・Data presented at Vascular Interventional Advances (VIVA), Las Vegas, NV, Aug. 2015

PRECISE® PRO RX

カタログ番号	ステントサイズ		デリバリーシステム	
	径 (mm)	長さ (拡張後) (mm)	推奨血管径 (mm)	適合シース/ ガイドイングサイズ (F)
PC0620RXC *	6	20	4-5	5/7
PC0630RXC		30		
PC0730RXC	7	30	5-6	
PC0740RXC		40		
PC0830RXC	8	30	6-7	
PC0840RXC		40		
PC0930RXC	9	30	7-8	
PC0940RXC		40		
PC1030RXC	10	30	8-9	6/8
PC1040RXC		40		

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名: 頸動脈用プリサイス ■承認番号: 21900BZX00781000 ■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/頸動脈用ステントセット

ANGIOGUARD® RX

カタログ番号	ガイドワイヤー径 (inch)	有効長 (cm)	全長 (mm)	推奨血管径 (mm)	最大プロファイル (F)
501814RMC *	0.014 (0.36mm)	180	5	3.5 to <4.5	3.4
601814RMC *			6	4.5 to <5.5	3.6
701814RMC *			7	5.5 to <6.5	3.7

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名: アンジオガード ■承認番号: 21900BZX00782000

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/血管内血栓異物除去用留置カテーテル/頸動脈用ステント併用型/フィルター型



[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社 / 〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

Cordis Circle

