

# AQUATRACK®

Fio Guia Hidrofílico de Nitinol

**Resposta instantânea**  
nas curvas






**Cordis**  
A Cardinal Health company

# Resposta instantânea nas curvas

## AQUATRACK®

Fio Guia Hidrofílico de Nitinol

Facilitando o acesso, não importando a anatomia tortuosa

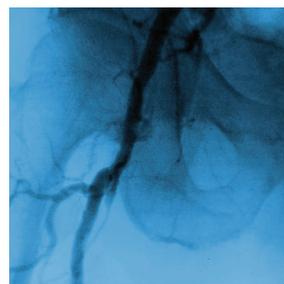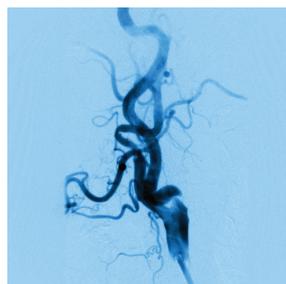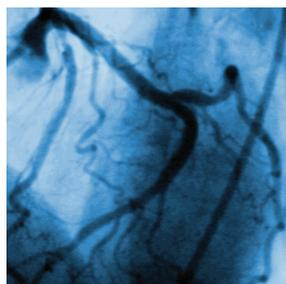

### Preciso a cada resposta ao torque\*

Em comparação ao Terumo Glidewire® o AQUATRACK® Fio Guia Hidrofílico de Nitinol proporciona:

- Controle mais preciso para seleção do vaso e capacidade de cruzamento (crossability)
- Resposta imediata, reduzindo o efeito "chicote"
- Mínimo risco de dobra, perfuração ou dissecção

#### Menos Efeito Chicote é Melhor



## Lubrificação duradoura\*

O revestimento hidrofílico do AQUATRACK® Fio Guia Hidrofílico de Nitinol:

- Minimizam a força de tração necessária para o posicionamento do fio
- Proporciona maior retenção da lubrificação para casos mais longos


O processo de revestimento hidrofílico Photolink®:

- Cria uma forte união entre o revestimento lubrificante e a superfície do fio
- Reduz a possibilidade de embolização causada pelos detritos da capa, devido à ligação química da capa com o fio

## Radiopacidade superior\*


Em comparação ao Terumo Glidewire®, o AQUATRACK® Fio Guia Hidrofílico de Nitinol:

- Apresenta-se significativamente mais visível sob fluoroscopia devido à maior quantidade de material radiopaco na capa polimérica
- Pode permitir procedimentos mais rápidos e mais precisos com menos complicações devido à maior visibilidade

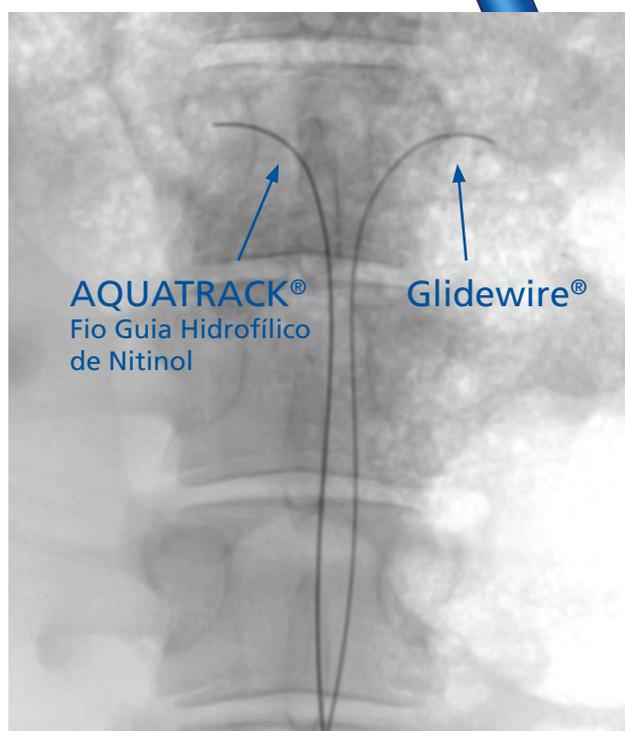


Cordis, dados em arquivo.

### Mais Radiopacidade

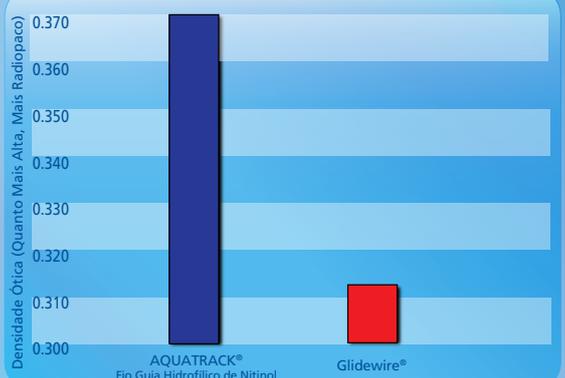

## Desempenho de Guia Hidrofílico. Torque de Fio Guia Convencional.

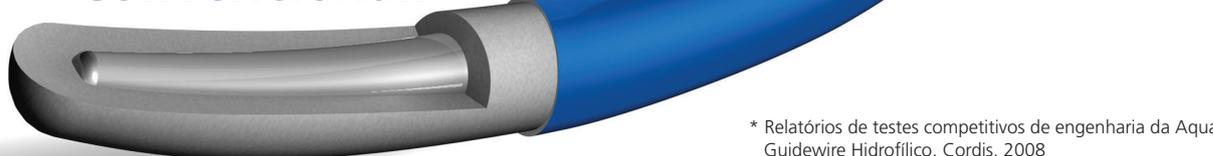

\* Relatórios de testes competitivos de engenharia da Aquatrack Guidewire Hidrofílico. Cordis. 2008

# AQUATRACK®

Fio Guia Hidrofílico de Nitinol

## Informações

Cordis AQUATRACK® Fio Guia Hidrofílico de Nitinol				
Código do produto	Comprimento	Rigidez	Perfil	Ponta
C3515-RSS	150cm	Regular	Curto	Reta
C3515-RSA	150cm	Regular	Curto	Angulada*
C3515-SSA	150cm	Rígido	Curto	Angulada*
C3518-RSS	180cm	Regular	Curto	Reta
C3518-RSA	180cm	Regular	Curto	Angulada*
C3518-SSA	180cm	Rígido	Curto	Angulada*
C3526-SSS	260cm	Rígido	Curto	Reta
C3526-SSA	260cm	Rígido	Curto	Angulada*
C3526-RSA	260cm	Regular	Curto	Angulada*


0.035" Embalagem de 5 unidades por caixa

\*Angulado = ângulo de 60 graus



Dispositivo de torque  
embalado com cada  
fio guia AQUATRACK®  
Fio Guia Hidrofílico  
de Nitinol

Para resultados notáveis, use o AQUATRACK® Fio Guia Hidrofílico de Nitinol em combinação com o cateter: diagnóstico TEMPO®. Com seu corpo trançado, é um parceiro perfeito para os procedimentos de angioplastia. Solicitamos que entre em contato com seu representante Cordis local para obter mais informações.

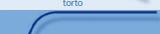Seleção de Cateteres Diagnóstico Cordis TEMPO®				
Formato	Comprimento	4F	5F	
Berenstein (BERN)	100cm	451-413H0	451-513H0	
Cobra Child I (C1)	65cm	451-442V0	451-542V0	
Cobra Small Adult (C2)	65cm	451-443V0	451-543V0	
Headhunter I (H1)	100cm	451-435H0	451-535H0	 arco moderadamente torto
Multipurpose Adult I (MPA1)	100cm	451-407H0	451-507H0	
Sidewinder Simmons Technique I (SIM1)	100cm	451-430H0	451-530H0	
Sidewinder Simmons Technique II (SIM2)	100cm	451-431H0	451-531H0	
Vertebral (VERT)	100cm	451-414H0	451-514H0	

0.038" - Compatibilidade do fio guia. Embalagem com 5 unidade por caixa

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, CORDIS LOGO, AQUATRACK E TEMPO são marcas comerciais registradas da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA AQUATRACK nº 81356112264, Reg. ANVISA TEMPO nº 81356112286.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite [www.cardinalhealth.com.br](http://www.cardinalhealth.com.br)  
SAC atendimento clientes Cardinal Health do Brasil: Telefone: (11) 2755-9426 - Email: [sac.brasil@cardinalhealth.com](mailto:sac.brasil@cardinalhealth.com)

© 2019 Cardinal Health. Todos os direitos reservados.

100534115 07/19

**Cordis**  
A Cardinal Health company