

AQUATRACK™

Guía de Nitinol Hidrófila

**Respuesta instantánea
en las curvas.**






Respuesta instantánea en las curvas

AQUATRACK™

Guía de Nitinol Hidrófila

Facilitando el acceso, a través de la anatomía tortuosa

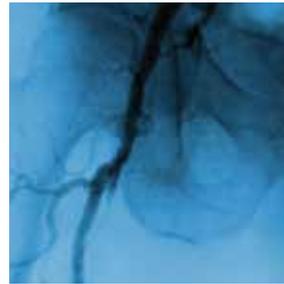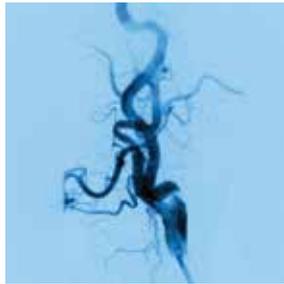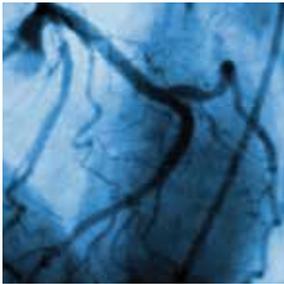

Precisión en cada respuesta al torque *

En comparación con el Terumo Glidewire®, AQUATRACK® Guía de Nitinol Hidrófila proporciona:

- Un control más preciso de la selección del vaso y capacidad de cruce de la lesión
- Respuesta inmediata
- Mínimo riesgo de acodamiento, perforación o disección

Capacidad de torque



Lubricidad duradera*

Recubrimiento hidrófilo de AQUATRACK™ :

- Minimiza la fuerza de empuje requerida para la colocación de la guía
- Proporciona mejor retención de la lubricidad en casos más prolongados


El proceso de recubrimiento hidrófilo Photolink™:

- Crea un vínculo fuerte entre el recubrimiento lúbrico y la superficie de la guía
- Reduce la posibilidad de embolización causadas por residuos de la cobertura debido a la unión química de la cubierta a la guía

Radiopacidad superior*


En comparación con el Terumo Glidewire®, AQUATRACK™
Guía de Nitinol Hidrófila:

- Se muestra significativamente más oscuro en la fluoroscopia debido al aumento del material radiopaco en la cubierta del polímero
- Puede permitir procedimientos más rápidos y más precisos con menos complicaciones debido al aumento de la visibilidad

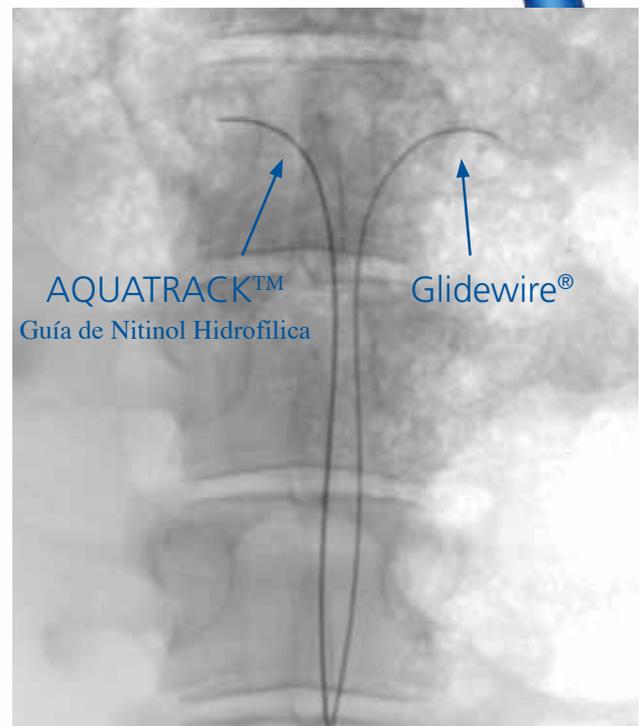

Sobre la base de pruebas en animales in vivo

Visualización

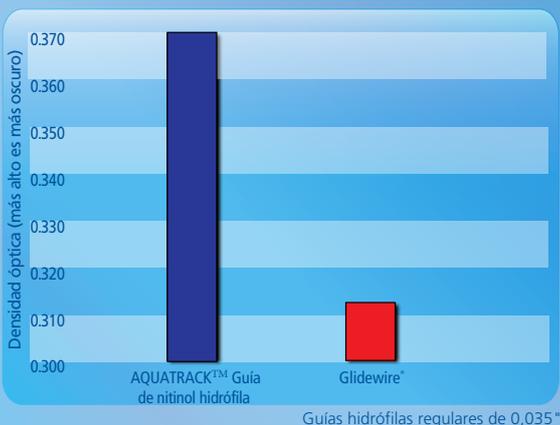

Rendimiento de la guía Hidrofílica Torque de la guía convencional



*Informes de prueba competitiva de ingeniería de la guía Hidrofílica Aquatrack. Cordis 2008

AQUATRACK™

Guía de Nitinol Hidrofílica

Información para pedidos

AQUATRACK™ Guía de Nitinol Hidrofílica				
Código de producto	Longitud	Rigidez	Conicidad	Punta
C3515-RSS	150cm	Regular	Corta	Recta
C3515-RSA	150cm	Regular	Corta	Angulada
C3515-SSA	150cm	Rígida	Corta	Angulada
C3518-RSS	180cm	Regular	Corta	Recta
C3518-RSA	180cm	Regular	Corta	Angulada
C3518-SSA	180cm	Rígida	Corta	Angulada
C3526-SSS	260cm	Rígida	Corta	Recta
C3526-SSA	260cm	Rígida	Corta	Angulada
C3526-RSA	260cm	Regular	Corta	Angulada


0.035" 5 unidades empaçadas por caja

*Angulada = 60 grados de ángulo



Dispositivo de torque
empaquetado con cada
AQUATRACK™ Guía
de Nitinol Hidrofílica

AQUATRACK™ Guía de Nitinol Hidrofílica puede ser utilizado con otros productos de la familia Cordis. Los productos que se listan a continuación son sólo una selección. Contacte a su representante de ventas local para más información acerca de las compatibilidades del producto.

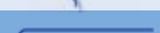Catéteres de Diagnóstico TEMPO™ AQUA™ Cordis seleccionados				
Curvas	Longitud	4F	5F	
Berenstein (BERN)	100cm	452-413H0	452-513H0	
Cobra pediátrico I (C1)	65cm	452-442V0	452-542V0	
Cobra adulto pequeño (C2)	65cm	452-443V0	452-543V0	
Cobra adulto pequeño (C2)	80cm	452-443S0		
Headhunter I (H1)	100cm	452-435H0	452-535H0	
Multipurpose adulto I (MPA1)	100cm	452-407H0	452-507H0	
Sidewinder Simmons Technique I (SIM1)	100cm	452-430H0	452-530H0	
Sidewinder Simmons Technique II (SIM2)	100cm	452-431H0	452-531H0	
Vertebral (VERT)	100cm	452-414H0	452-514H0	
Recto (STR)	125cm	SRD 6682		

Compatibilidad de guía 0,038" Empacado 1 por caja.

Solo para los profesionales de salud.

Información importante: Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones. Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa.

CORDIS, Cordis LOGO, AQUATRACK y TEMPO son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en los EE. UU. y / o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Cordis.
© Cardinal Health 2019. Todos los derechos reservados.

100534115 11/2019

Cordis
A Cardinal Health company