

Cordis AVANTI[®] + Introducutor

Desempeño uniforme de principio a fin



AVANTI® + Para una inserción sin traumas


La cánula ofrece un desempeño confiable y uniforme de principio a fin



- *Para una inserción suave y sin traumas*
- *Gran resistencia a torceduras*
- *Maniobrabilidad optimizada del catéter*

Para una inserción suave y sin traumas

- La punta asegura la transición suave del introductor a medida que cruza el mini guía hacia la arteria durante la inserción inicial
- Transiciones suaves entre la cánula, guía y el dilatador para:
 - entrada en el vaso sin esfuerzo
 - mayor comodidad del paciente
 - el menor riesgo posible de complicaciones

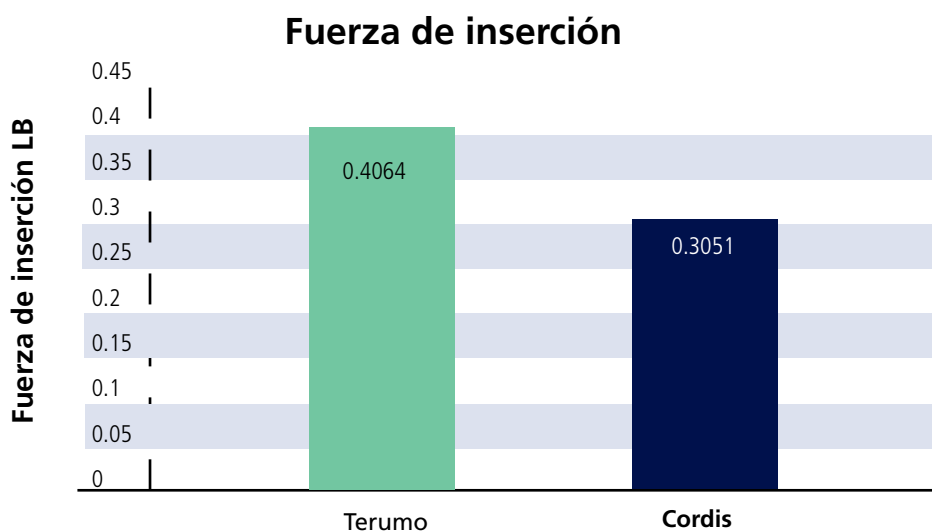

AVANTI® + Flexibilidad y fuerza para una mayor seguridad del paciente

Gran resistencia a torceduras


El material de doble capa da a AVANTI® + una excelente flexibilidad y la fuerza necesaria para evitar torceduras - incluso en vasos tortuosos y tejido cicatricial




Maniobrabilidad optimizada del catéter con fugas mínimas

La válvula hemostática SLIX patentada con diseño en espiral de seis cortes permite el libre movimiento del catéter sin reflujo sanguíneo o aspiración de aire

Radio de Torsión

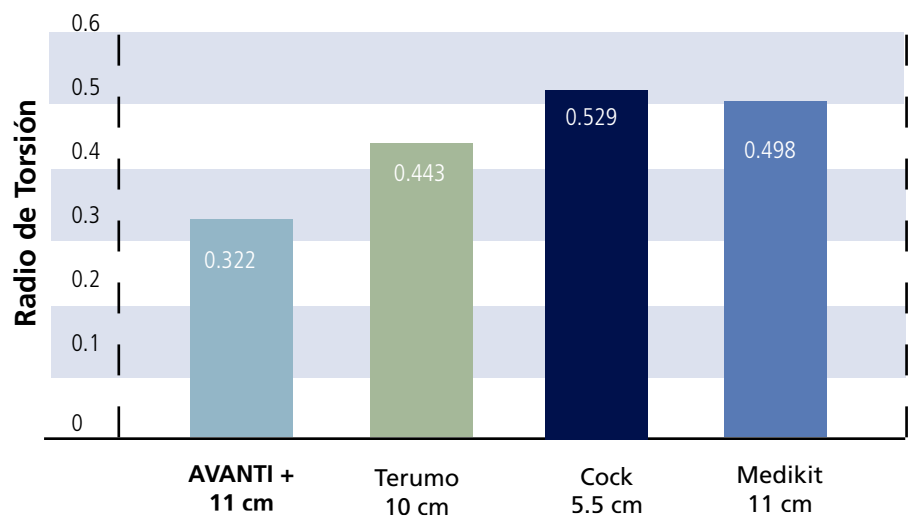

Prueba de Lubricidad de la válvula

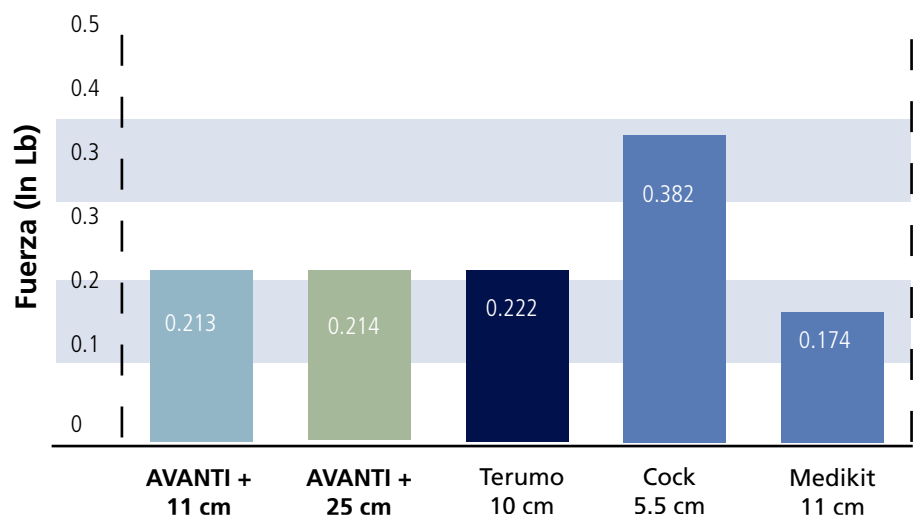

Desempeño uniforme de principio a fin

Disponibile con o sin mini guía
(longitud media sin alambre solamente)

Disponibile en tres longitudes
(longitud utilizable de la cánula)

- ▶ 5.5cm = **pediátrico**
- ▶ 11cm = **longitud estándar**
- ▶ 23cm = **longitud media**



Números de Catálogo Endovascular

Tamaño en French	Código de color	Cánula de 5.5cm		Cánula de 11cm		Cánula de 23cm
		Con mini guía	Sin mini guía	Con mini guía	Sin mini guía	Sin mini guía
4	■	402-604P		402-604X	402-604A	
5	■	402-605P		402-605X	402-605A	402-605T
5.5	■			402-655X		
6	■	402-606P	402-606R	402-606X	402-606A	402-606T
6.5	■			402-656X		
7	■	402-607P	402-607R	402-607X	402-607A	
8	■			402-608X	402-608A	402-608T
9	■			402-609X	402-609A	402-609T
10	■			402-610X	402-610A	
11	■			402-611X		

CARDIOLOGÍA: AVANTI®+ Introdutor estándar

Cánula de 11 cm				
Tamaño en French	Código de color	mini guía (pul)	Con mini guía	Sin mini guía
4	■	.035	504-604X	504-604A
5	■	.038	504-605X	504-605A
5.5	■	.038	504-655X*	
6	■	.038	504-606X	504-606A
6.5	■	.038	504-656X*	504-656A*
7	■	.038	504-607X	504-607A
7.5	■	.038	504-657X*	
8	■	.038	504-608X	504-608A
8.5	■	.038	504-658X*	
9	■	.038	504-609X	504-609A
10	■	.038	504-610X	504-610A
11	■	.038	504-611X	

* Vaina de monitoreo: posee un DI ligeramente mayor para el monitoreo de presión o aspiración de puerto lateral con un catéter instalado; tienen un tamaño 1 French mayor



CARDIOLOGÍA: AVANTI®+ Introdutor de longitud media

Cánula de 23 cm				
Tamaño en French	Código de color	Dilatador utilizable (cm)	Con obturador	Sin obturador
4	■	30		504-604T
5	■	30		504-605T
6	■	30	504-606D	504-606T
6.5	■	30		504-656T*
7	■	30	504-607D	504-607T
8	■	30	504-608D	504-608T
10	■	30		504-610T
11	■	30		504-611T



CARDIOLOGÍA: AVANTI®+ Introdutor sin válvula sin puerto con mini guía

Cánula de 11 cm			
Tamaño en French	Código de color	Minialambre (pul)	Número de catálogo
6	■	.038	504-606V
7	■	.038	504-607V
8	■	.038	504-608V



Cordis AVANTI® + Introducutor

CARDIOLOGÍA: AVANTI®+ Introducutor con minialambre guía

Cánula de 5,5 cm			
Tamaño en French	Código de color	Minialambre (pul)	Número de catálogo
4	■	.035	504-604P
5	■	.038	504-605P
6	■	.038	504-606P



CARDIOLOGÍA: AVANTI®+ Introducutor pediátrico con minialambre guía

Cánula de 7,5 cm			
Tamaño en French	Código de color	Minialambre (pul)	Número de catálogo
4	■	.021	504-604S
5	■	.021	504-605S
6	■	.021	504-606S



CARDIOLOGÍA: AVANTI®+ Kit introducutor transradial con mini guía

Tamaño en French	Código de color	Cánula de 11 cm		Cánula de 23 cm	
		Guía (pul)	Número de catálogo	Guía (pul)	Número de catálogo
4	■	.021	504-614Z	.021 70 cm	504-624Z
5	■	.021	504-615Z	.021 70 cm	504-625Z
6	■	.021	504-616Z	.021 70 cm	504-626Z
7	■	.021	504-617Z		



Información importante: Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones. Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa. Solo para los profesionales de salud.

CORDIS, el LOGO de Cordis, AVANTI+ son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en EE. UU. y / o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2018 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. 100509986 04/18

Cordis
A Cardinal Health company