

VISTA BRITE TIP® IG

Cateter Guia Valvulado

A junção perfeita




VISTA BRITE TIP® IG

Cateter Guia Valvulado com dilatador de vaso e
válvula hemostática SLIX 7F, 8F e 9F

Para Carótidas, Renais e Contralateral

VISTA BRITE TIP® IG Cateter Guia Valvulado combina as qualidades de guia e manuseio do cateter guia VISTA BRITE TIP® com as vantagens do introdutor AVANTI®+ em um único dispositivo.

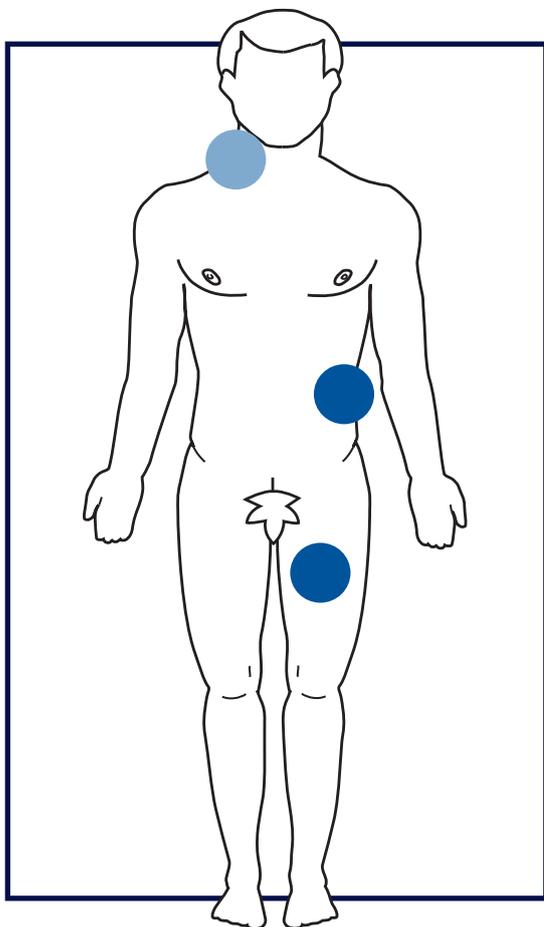

- Lúmen extragrande
- Memória de formato
- Corpo flexível
- Resistente a dobras
- Visualização de fluxo
- Fácil inserção na pele
- Mínima perda de sangue
- Controle de torque
- Ponta flexível atraumática
- Ponta radiopaca
- Revestimento interno em Teflon
- Lúmen verdadeiro
- Conforto e segurança para o paciente

Segmento 3: Firmeza com flexibilidade... Gentileza

Excelente flexibilidade para melhor conformação a anatomia do paciente e para facilitar a navegação de dispositivos.

Segmento 4: Estável e com manobrabilidade

Para garantir a manobrabilidade do guia enquanto a firmeza suficiente é mantida para continuar a fornecer sólido back-up suporte.

Segmento 5: Máxima firmeza para controle

Ótima mistura entre tipos de nylon oferece equilíbrio entre corpo firme e flexibilidade do segmento distal, resultando em excelente empurabilidade e capacidade de transmissão de torque 1:1 do hub até a ponta. O trançado em aço inoxidável minimiza o kinking.

Segmento 6: Suave revestimento em Teflon

Para lubrificidade interna e suave passagem de dispositivos.

Segmento 2: Flexibilidade aumentada aonde é necessário

Ponta distal flexível, pré-moldada e atraumática para fácil canulação e alinhamento coaxial.

Segmento 1: Ponta radiopaca macia


A ponta é desenhada para engajamento atraumático seguro e posicionamento preciso.

Segmento 8: Fácil introdução de líquidos

Porta lateral com colar de sutura rotável permite fácil injeção de contraste.

Segmento 7: Alta manobrabilidade com mínimo refluxo

Patenteada válvula hexacúspide SLIX permite movimento sem refluxo de sangue ou entrada de ar.

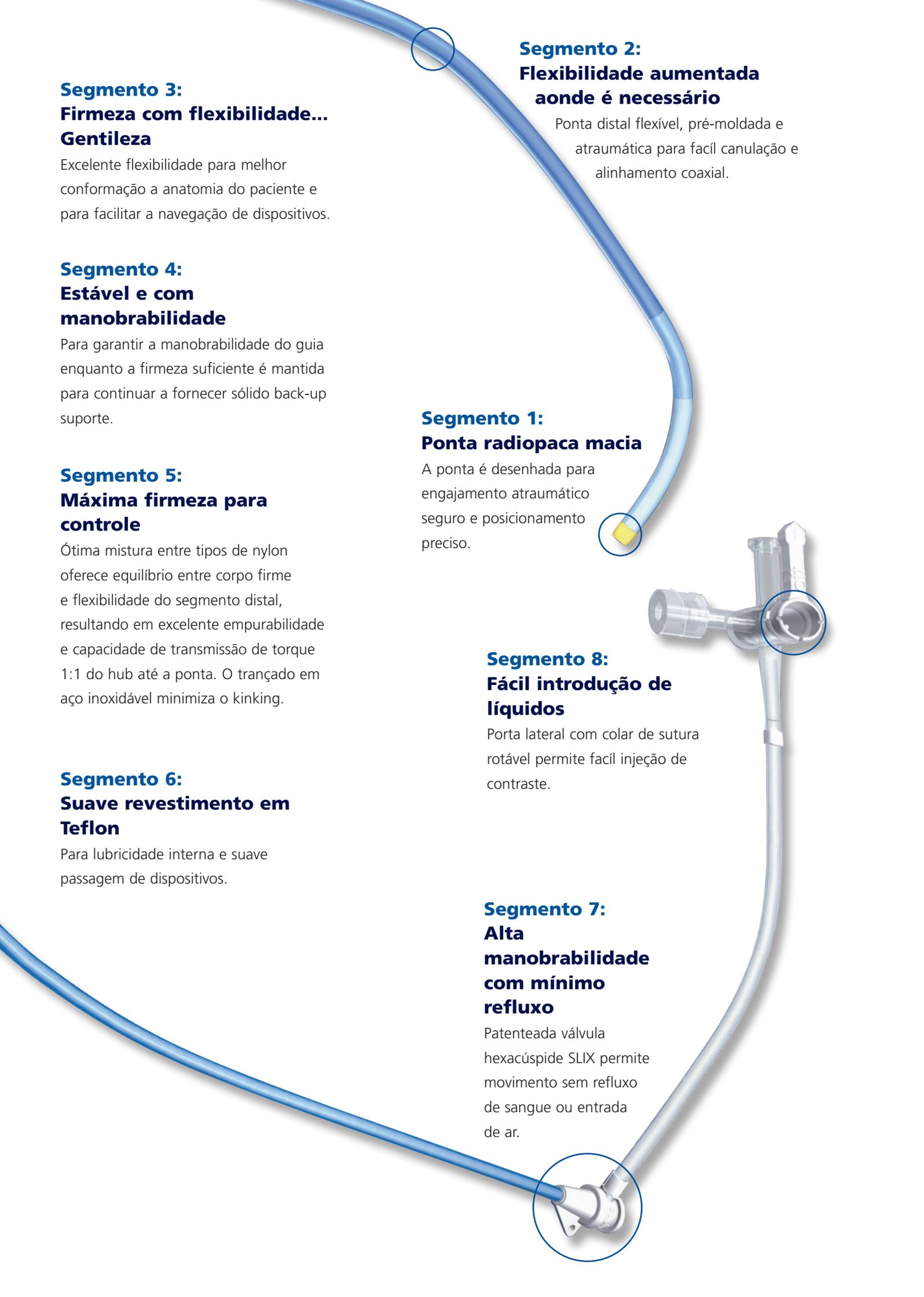


VISTA BRITE TIP® IG

Cateter Guia Valvulado

Comparação entre Tamanhos da Punção

O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG permite um tamanho menor de punção em comparação com a combinação introdutor e cateter guia. Esta pequena redução no tamanho da punção pode ser traduzida em menos tempo de compressão para um procedimento mais rápido, menor risco de trombose e maior eficiência do serviço, aumentando o conforto do paciente. Além disso, o cateter guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG incorpora todas as vantagens de um cateter guia VISTA BRITE TIP®, que proporciona estabilidade e firmeza com suporte e torqueabilidade ideais para contribuir com a segurança do procedimento.

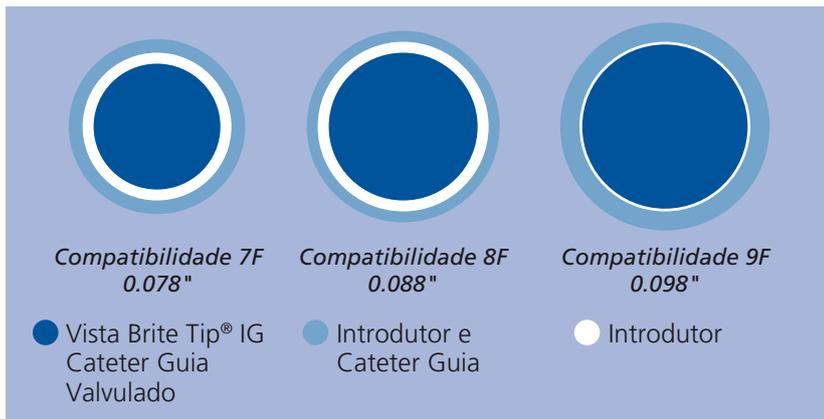

O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG possui a patenteada válvula hemostática SLIX com desenho espiral de seis cortes que permite o livre movimento do cateter com mínimo refluxo de sangue.

Código do Produto	Formato da Curva	Comprimento (cm)	Diâmetro Externo (F)	Diâmetro Interno (Pol)	Desenho da Curva
4037553A	Renal II (adulto)	55	7	.078"	
4037553R *	Renal I (pequena)	55	7	.078"	
4037553H *	Hockey Stick	55	7	.078"	
4037553C *	Contralateral I	55	7	.078"	
4037553M *	Multipurpose	55	7	.078"	
4038553A *	Renal II (adulto)	55	8	.088"	
4038553R *	Renal I (pequena)	55	8	.088"	
4038553H *	Hockey Stick	55	8	.088"	
4038553C	Contralateral I	55	8	.088"	
4038553M	Multipurpose	55	8	.088"	
4038553S *	Reto (STR)	55	8	.088"	
4038953M	Multipurpose	95	8	.088"	
4038953S *	Reto (STR)	95	8	.088"	
4038953B	Burke Cerebral Modificada (CBL)	95	8	.088"	
4039953M	Multipurpose	95	9	.098"	

* Códigos Importados Sob Encomenda MTO

Embalagem

O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG é etiquetado (classificado) da mesma maneira que o cateter guia VISTA BRITE TIP® pelo seu diâmetro externo em French e diâmetro interno em Polegada. Esta disponível em vários formatos de ponta. Um dilatador de vaso flexível com ponta radiopaca acompanha cada embalagem.

Somente para profissionais da saúde

Informação importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO, VISTA BRITE TIP, e AVANTI são marcas comerciais registradas da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Reto nº 81356112294, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG MPA nº 81356112298, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Hockey Stick nº 81356112293, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Renais nº 81356112296, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Contralateral nº 81356112295, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Burke Cerebral nº 81356112297.

Advertências: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br

SAC Atendimento a Clientes Cardinal Health do Brasil. Telefone (11) 2755-9426 / Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

©2020 Cardinal Health. Todos os direitos reservados.

100565166 09/2020

Cordis
A Cardinal Health company