


Cordis **VISTA BRITE TIP**[®]

Cateter Guia - Curvas Periféricas

Cateter Guia Curvas Periféricas

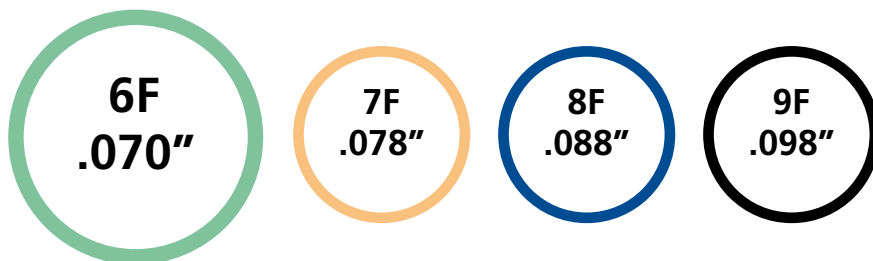

Lúmen extra grande
para o 6F com .070"



Cordis **VISTA BRITE TIP**[®]

Cateter Guia - Curvas Periféricas

Uma nova dimensão em performance

Cordis continua sendo a empresa líder em tecnologia e desenvolvimento de cateteres.

O VISTA BRITE TIP[®] 6F com lúmen extragrande de .070" agrega valor aos médicos por ter lúmen interno maior, mantendo o diâmetro externo de 6F e as características de desempenho do cateter guia VISTA BRITE TIP[®].

Portfólio VISTA BRITE TIP[®]

6F
.070"

7F
.078"

8F
.088"

9F
.098"


Grande variedade de curvas, tamanhos e formatos

O lúmen interno grande melhora a visualização do vaso otimizando a passagem de dispositivos intervencionistas.

O revestimento interno lubrificado de PTFE otimiza a passagem dos dispositivos intervencionistas.

O trançado interno em aço inoxidável possibilita a transmissão de torque 1:1 minimizando dobras.

Ótima mistura entre tipos de nylon oferece equilíbrio entre corpo firme e flexibilidade do segmento distal.

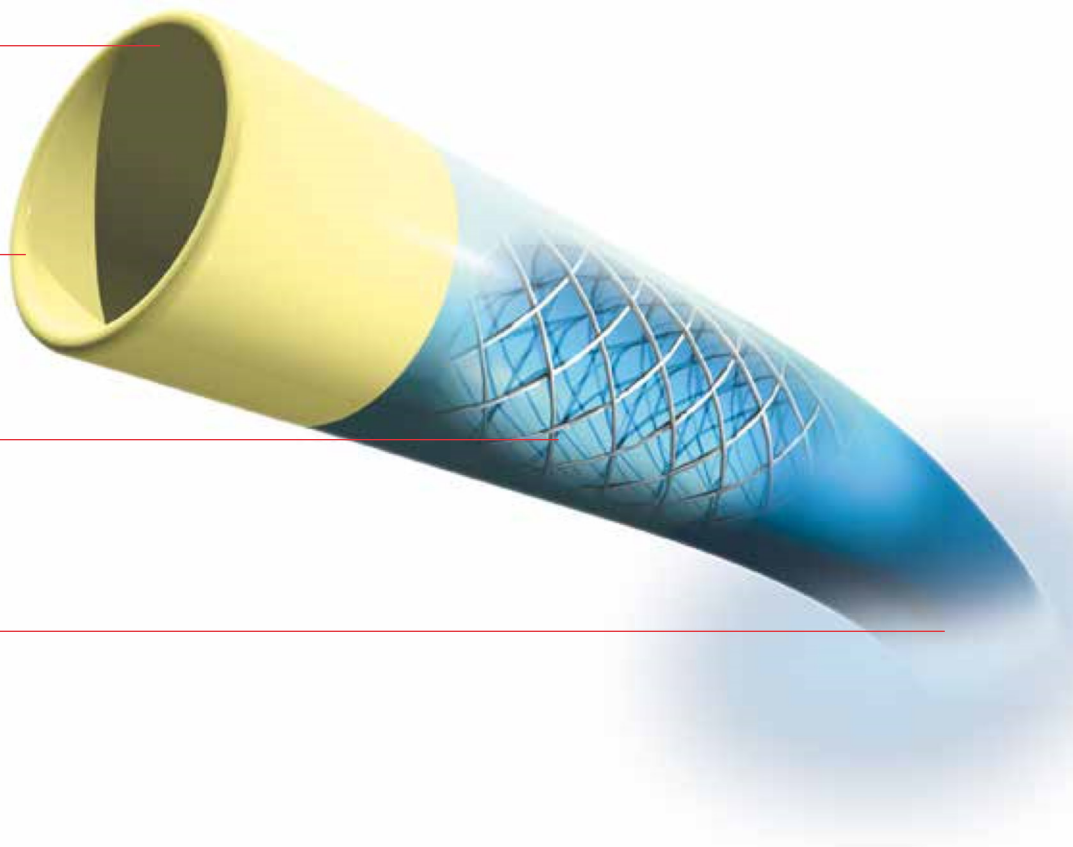

Trançado Híbrido

Reduz a espessura da parede

Lúmen Interno Grande

Grande flexibilidade para acomodar dispositivos

Permite a entrega de dispositivos maiores. Oferece maior área para injeção de contraste. Aumenta a visualização durante a angiografia.

Desenho Multisegmentado

Equilíbrio ideal entre firmeza e flexibilidade para atender diversas anatomias

Facilidade na canulação. Mantém a memória de formato de ponta durante o procedimento. Ponta atraumática altamente visível.

Revestimento de PTFE

Superfície interna altamente lubrificada

Suave passagem de dispositivos. Aumenta as taxas de injeção e a visualização.

Embalagem

A caixa do VISTA BRITE TIP® facilita a identificação, o armazenamento e o manuseio no estoque da hemodinâmica.



Fácil de Identificar

Area externa da caixa com rótulo codificado por cores e total clareza nas informações.
Embalagem interna codificada por cores para fácil identificação do diâmetro em French.

Fácil de Armazenar

Caixa compacta para diminuir o espaço de armazenamento.
Embalagem tipo pendurador que permite o armazenamento na posição vertical.


6F
0.70"

Cordis **VISTA BRITE TIP**[®]

Cateter Guia - Curvas Periféricas

Aumente suas possibilidades

Exclusiva tecnologia de fabricação com desenho multissegmentado

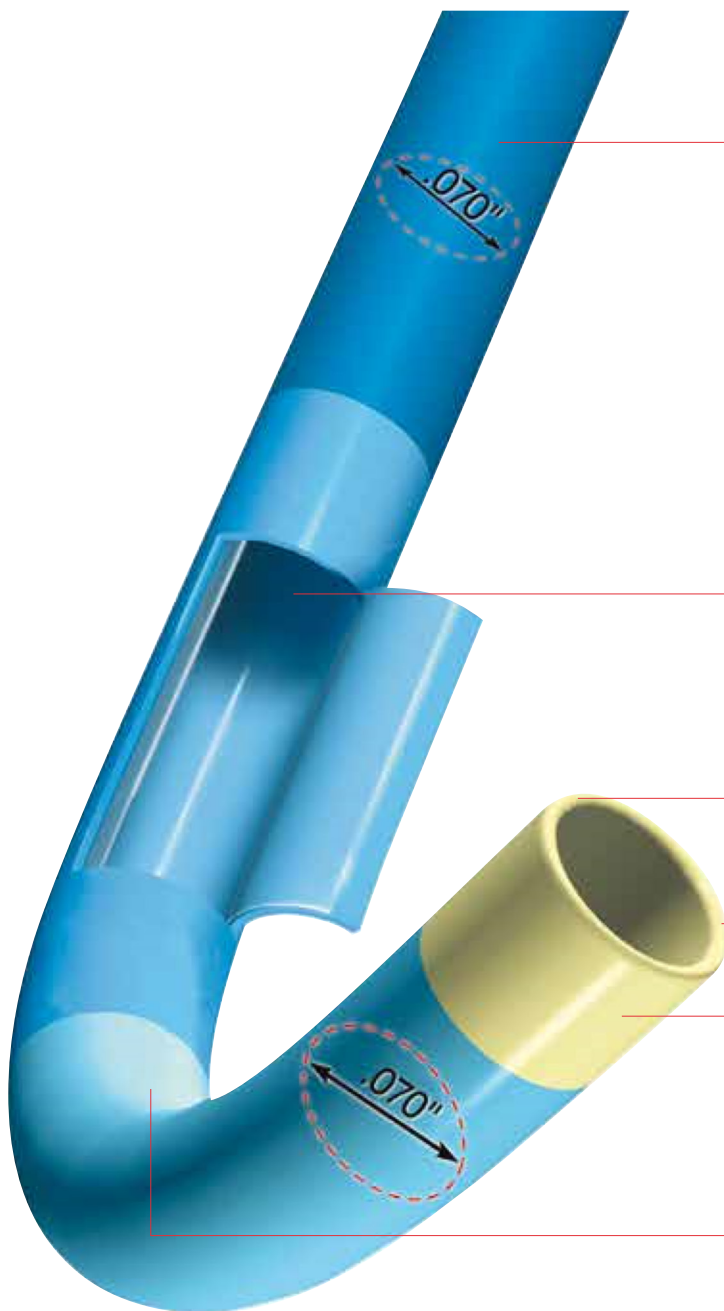

Segmentos de Torque/Suporte

Firme porém flexível, para controle preciso e backup suporte.

Segmento Resistente a kinks

Absorve a energia entre os segmentos rígidos e flexíveis para resistir as dobras.

Segmento BRITE TIP[®]

Altamente visível e macio para uma cateterização precisa e segura.

Lúmen Verdadeiro

Do conector até a ponta distal do cateter.

Ponta Radiopaca Macia

Precisa e atraumática cateterização sem traumas no vaso durante a manipulação.

Segmento de Alinhamento Coaxial

Flexível para facilitar a canulação e o alinhamento coaxial.


Cordis VISTA BRITE TIP®

Cateter Guia - Curvas Periféricas

Informações para Pedidos

Curva	Comprimentos (cm)	6F .070"	7F .078"	8F .088"	9F .098"
Reto (STR)	55	67028055 *			
Reto (STR)	90	67028090 *		588844P *	598944P *
Multipurpose (MPAI)	55	67027055 *	77827055 *		
Multipurpose (MPAI)	90	67027090	77827090 *	588842P	598942P
Multipurpose (MPD)	95			5888207	
Hockey Stick	55	67027855 *			
Renal I (RDCA1)	55	67021055	77821055	588845P	
Renal II (RDCA2)	55	67021255	77821255	588846P	
Judkins Right (JR4)	55	67008255 *			
Mamária Interna	55	67019055 *			
Curva J	55	67021455 *	77821455 *		
Vertebral	90		77821690	588847P	
Contralateral I	55		77822255 *	588857P	
Contralateral II	55		77822455	588858P	
Burke Cerebral Modificada (CBL)	90	67021890 *		588848P *	

* Códigos Importados Sob Encomenda MTO

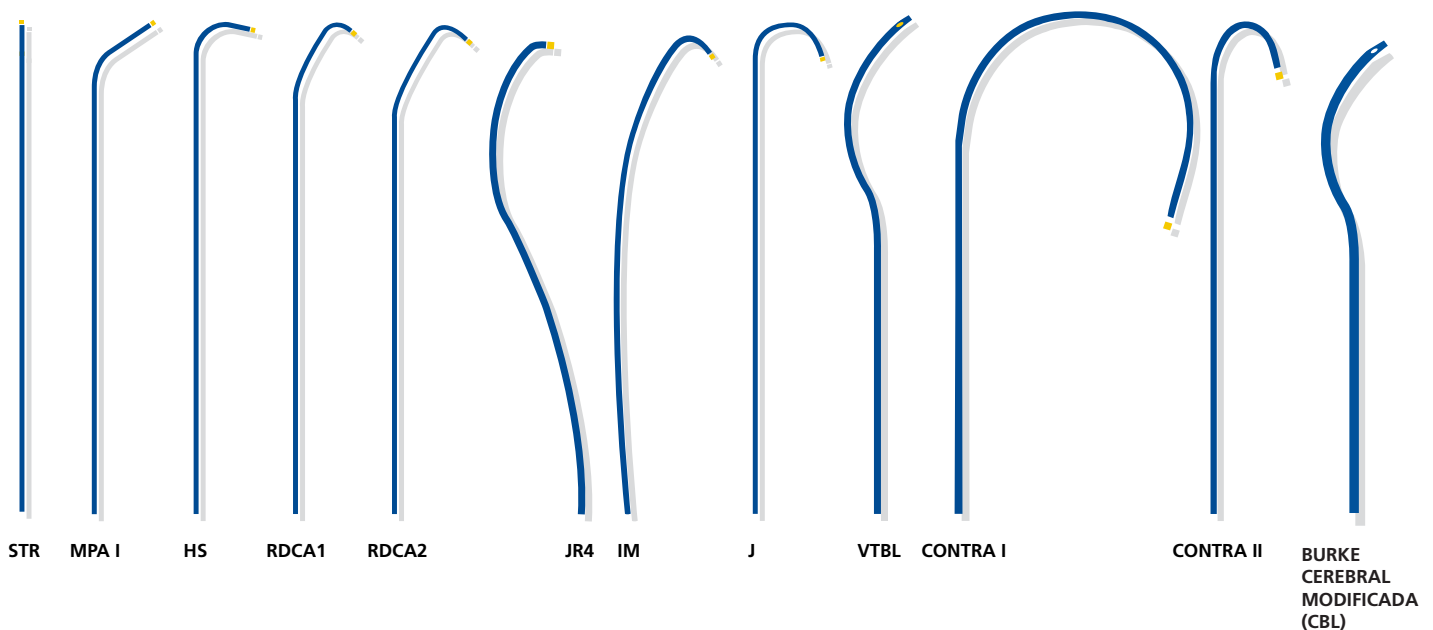

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO, BRITE TIP e VISTA BRITE TIP são marcas comerciais registradas da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. VISTA BRITE TIP® 6F e 7F - Registro ANVISA nº 81356112299, VISTA BRITE TIP® 8F - Registro ANVISA nº 81356112300, VISTA BRITE TIP® 9F Registro ANVISA nº 81356112301.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br
SAC atendimento clientes Cardinal Health do Brasil: Telefone: (11) 2755-9426 - Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

© 2019 Cardinal Health. Todos os direitos reservados.

100549059 11/2019

Cordis
A Cardinal Health company